

Mode d'emploi succinct

Moisture Analyzer HR83

Informations détaillées, voir mode d'emploi

METTLER TOLEDO

Détermination du taux d'humidité (cycle de mesure et indicateur d'état "User Guide")

<p>Mettre sous tension</p>	<p>1 Menu de base</p> <p>«Reset» permet de revenir au menu de base</p>	<p>2 Poser le porte-échantillon</p>	<p>3 Tarer</p>	<p>4 Peser</p>	<p>5 Démarrer</p>	<p>6 Dessiccation</p> <p>attendre....</p>	<p>7 Lire résultat</p> <p>F IN: 5.37%</p>
----------------------------	--	-------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	---	---

Entrée de la température de la dessiccation (standard et rapide)

°C 125

°C 130

Entrée de la durée de dessiccation

min 3:30

min 4:00

Sélection de la méthode

Sélectionner la méthode:

Method 01

12

Entrées numériques

°C 95

ou:

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . <

°C 125

Entrées alphanumériques

A

M

A..Z

MARCAP INC

Réglage: Module de chauffage

Menu CAL.P: OUI

CAL.T: NON

CAL.T: OUI

1. Entrer la température indiquée sur le kit de réglage de la température:

CAL.T: 102

2. Entrer la température indiquée sur le kit de réglage de la température:

CAL.T: 158

Réglage: Balance

Menu CAL.P: NON

CAL.P: OUI

CAL.P: 50.000g

CAL.P: 50.000g

Touches de fonction

Sélection du critère d'arrêt

Arrêt automatique

1: échantillon séchant rapidement

5: échantillon séchant lentement

Arrêt manuel avec la touche «Stop»

Mesure d'essai avec impression du compte rendu

Critère d'arrêt libre 1 critère d'arrêt libre par méthode

Sélection du mode d'affichage

Taux d'humidité

0 -100

Taux de matière sèche

0 100

Poids actuel de l'échantillon, en grammes

g

Taux d'humidité ATRO

0 -1000

Taux de matière sèche ATRO

0 1000

Sélection du programme de dessiccation

Dessiccation standard

Dessiccation rapide

Dessiccation modérée (avec rampe de température)

Dessiccation par paliers



* 1 1 7 8 0 5 3 9 *

Messages d'erreur


ERREUR: 1	Cause: Instabilité lors du tarage ou du réglage Remède: Chercher des conditions stables/un emplace-ment idéal/veiller à ce que ni des parties de l'échantillon ni le plateau de la balance ne touchent le pare-brise annulaire ou le support du porte-échantillon
ERREUR: 2	Cause: Poids de réglage absent ou erroné Remède: Mettre le poids correct
ERREUR: 3	Cause: Echantillon trop léger Remède: Peser un échantillon avec le poids minimal (100 mg)
ERREUR: 4	Cause: Porte-échantillon non taré Remède: Tarer le porte-échantillon
ERREUR: 5	Cause: Dépassement de la plage admissible. Dans le cas de la touche «Target», voir Mode d'emploi Remède: Entrer des valeurs dans la plage admissible. Dans le cas de la touche «Target», voir Mode d'emploi
ERREUR: 6	Cause: Le clavier a été bloqué dans le menu, l'imprimante ont été désactivés dans le menu Remède: Débloquer le clavier, activer l'imprimante dans le menu
ERREUR: 7	Cause: Le critère d'arrêt sélectionné ne permet pas l'entrée du temps Remède: Sélectionner le critère d'arrêt "arrêt commandé dans le temps"
ERREUR: 8	Cause: Limite du temps dépassée (10 minutes) pour l'entrée des valeurs lors du réglage de module de chauffage Remède: Répéter le réglage de module de chauffage et entrer les valeurs dans les temps
ERREUR: 9	Cause: Etat indéfini Remède: Actionner «Reset» ou mettre l'appareil hors tension puis sous tension à l'aide de la touche «On/Off».
ERREUR: 10	Cause: La chambre de mesure n'est pas encore suffisamment refroidie Remède: Laisser l'appareil refroidir à la température de départ
ERREUR: 11	Cause: Le mot de passe n'a pas été entré correctement Remède: Entrer correctement le mot de passe
ERREUR: 12	Cause: Les paramètres méthode sont protégés par un mot de passe (MP-1) Remède: Réinitialiser le mot de passe MP-1, changer les méthodes et redéfinir MP-1

Important: Vous devez acquitter les messages d'erreur à l'aide de la touche «Reset» avant de poursuivre. Remarques sur d'autres messages d'erreur dans le mode d'emploi de l'appareil.


Impression du protocole long (exemple)

A ----- MESURE HUMIDITE -----	A Titre du compte rendu
B CAFE SA	B Texte de la raison sociale
C PRODUCTION XY	C Texte du nom du service
D METTLER TOLEDO Halogen MoistureAnalyzer	D Fabricant et désignation de l'instrument
E Type: HR83	E Type de l'instrument
F SNR: 1234567890	F Numéro de série de l'instrument
G SW: 2.01	G Numéro de la version du logiciel
H Réglage balance 52	H Identification du réglage de la balance
B Régl. module chauff. 23	I Identification du réglage du module de chauffage
J Mesure 12	J Numéro courant de la mesure
K Méthode: 38	K Numéro et nom de la méthode sélectionnée
I C1: CONTRÔLE QUALITE	L Lignes de commentaire
C2: AVANT REMPLISSAGE	M Critère d'arrêt sélectionné
C3: CHARGE 4711	N Programme de dessiccation choisi
C4: HANS MUSTER	O Durée de la rampe
M Critère d'arrêt 2	P Température de dessiccation (température de consigne)
N Gentle drying	Q Mode d'affichage sélectionné
O Durée rampe 1:00 min	R Poids de l'échantillon avant dessiccation
Temp. dessicc. 105 °C	S Valeur de mesure à chaque impression
Affichage 0...-100 %MC	T Durée totale de la dessiccation
Poid initial 2.507 g	U Poids à sec de l'échantillon en grammes
S 1:00 min -2.51 %MC	V Affichage de la teneur en humidité
2:00 min -3.39 %MC	W Résultat final dans le mode d'affichage choisi
3:00 min -3.71 %MC	X Champ pour la signature
T Durée totale 3:19 min	Y Date et heure à la fin de la mesure
U Poid sèche 2.412 g	
V Humidité 0.095 g	
W Rés.final -3.79 %MC	
X Signature: -----	
Y -----30.06.08-----15.18-----	

Vue d'ensemble du menu

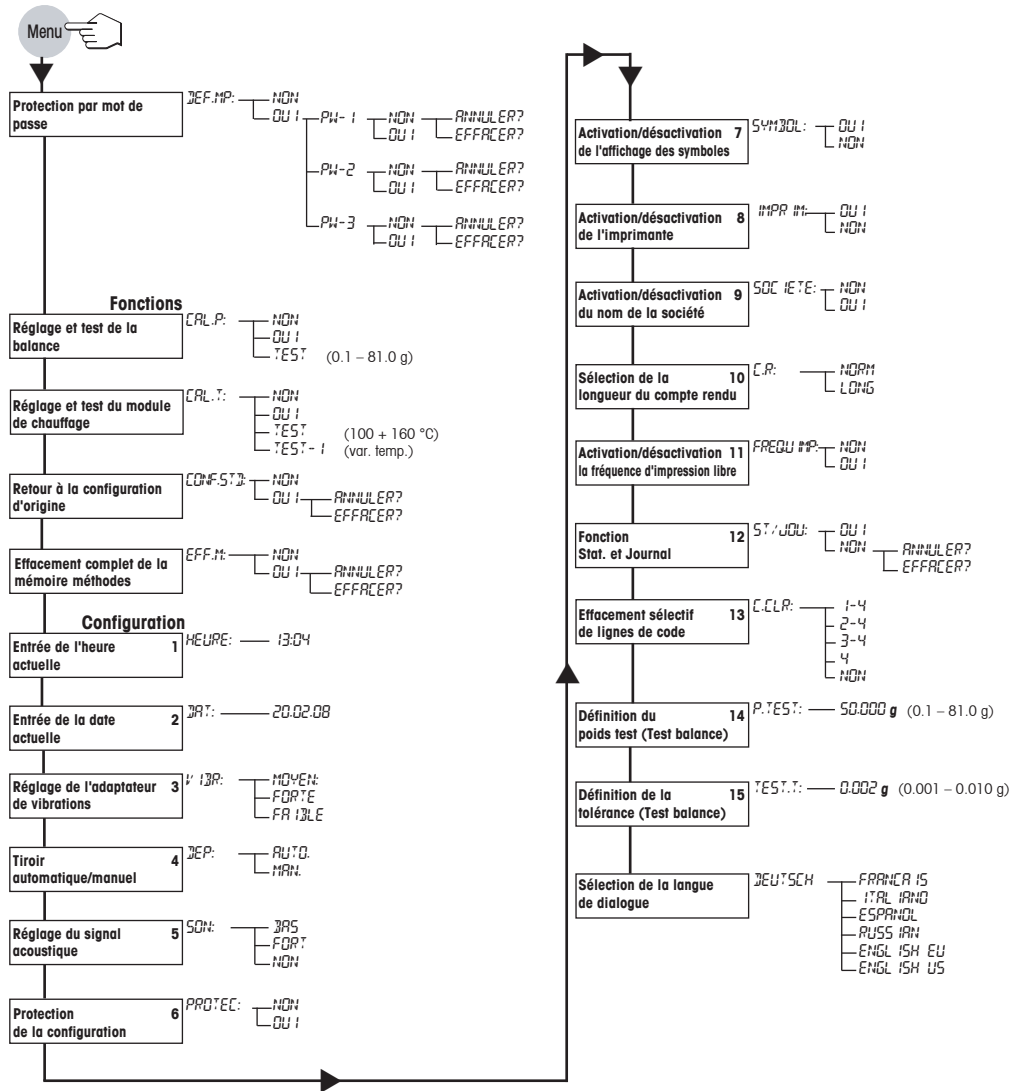

Vue d'ensemble du menu Méthode

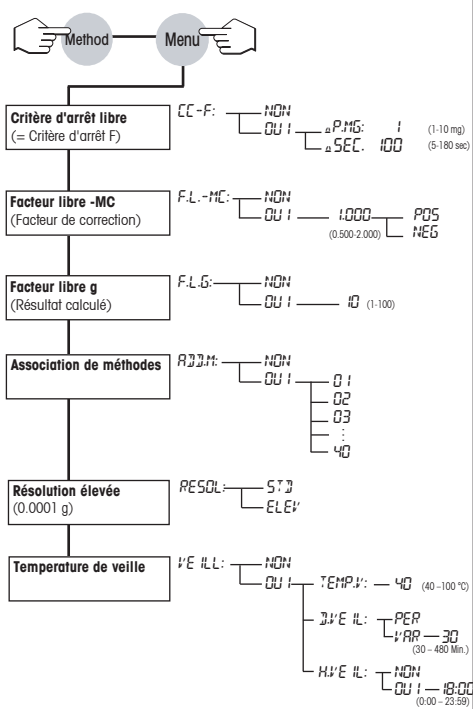

Sélection du réglage à l'intérieur du menu:

- Quitter le menu sans sauvegarde du dernier point modifié
- Sauvegarde du réglage et passage au point de menu suivant
- Appel du point de menu suivant
- Sélectionner les réglages
-